

ご愛用ありがとうございます。お客様がご使用の電位・温熱治療器の使い心地はいかがでしょう？




愛情点検で快適な毎日を

長年ご使用の家電製品は、経年劣化が原因の故障や事故が発生する場合がございます。これらを未然に防ぐため、日頃からチェックを行いましょう。治療器の点検もさせていただきます。

このような症状はありませんか？



- 部分的にあつい場所や暖かにならない所がある【温度ムラ】
- 異常に熱い【発熱体の異常高温】
- 本体表面が熱により部分的に変色している
- 本体表面やシーツに破れている場所がある
- 折りたたみ部分に異常(極度な凹凸)がある【発熱体の破れ・硬化】
- ときどき暖まらないときがある
- コントローラー内部やコードが熱い
- コントローラーの損傷
- コードやブッシュのすりきれ、やぶれ、キズ
- その他これまでと違ったとき(イヤな臭いにおいがするなど)

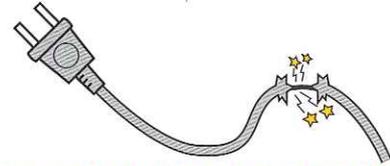

少しでもおかしいと思ったらご使用を中止してください。

- 故障や事故の原因になる恐れがあり、このままご使用いただくのは大変危険です。
- 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店またはメーカーにご相談ください。ただし機種によっては、修理できない場合もありますのでご了承ください。

長年あなたの健康のためにがんばってきましたが、そろそろ限界かも？

見えない所はもちろん、表面のよごれやおとろえも目立ってきます。



診断をお願いします

長年のご愛用で見た目や機能に問題がなくても、わたがヘタリ、かさが落ちて通気性も悪くなってきます。治療器の点検(診断)をしましょう。

(他の家電製品は4~6年でそろそろ世代交代をはじめます。)



いつもご愛用いただきありがとうございます。これからも皆様の健康づくりのお手伝いをさせていただきます。

製造元

Eテクノエレメント株式会社
〒435-0056 静岡県浜松市東区小池町1532番地
TEL 053-435-1161

販売元